

Sistem za neprekinjeno merjenje glukoze Vodnik za zagon aplikacije CGM

Pregled sistema i3 CGM


Za popolna navodila in informacije o sistemu se obrnite na vaš priročnik za uporabo.

Uporabniški vodnik je na voljo v elektronski obliki. Obiščite spletno stran iCan-cgm.com, da prenesete PDF.

Če potrebujete tiskano različico priročnika za uporabo, prosimo, kontaktirajte prodajalca ali pošljite zahtevo na email: support@icancgm.com Zagotovljena bo v sedmih dneh brezplačno.

Če imate kakršna koli vprašanja, prosimo pošljite e-pošto: support@icancgm.com

Vse slike so simbolične. Vaš izdelek je lahko drugačen.

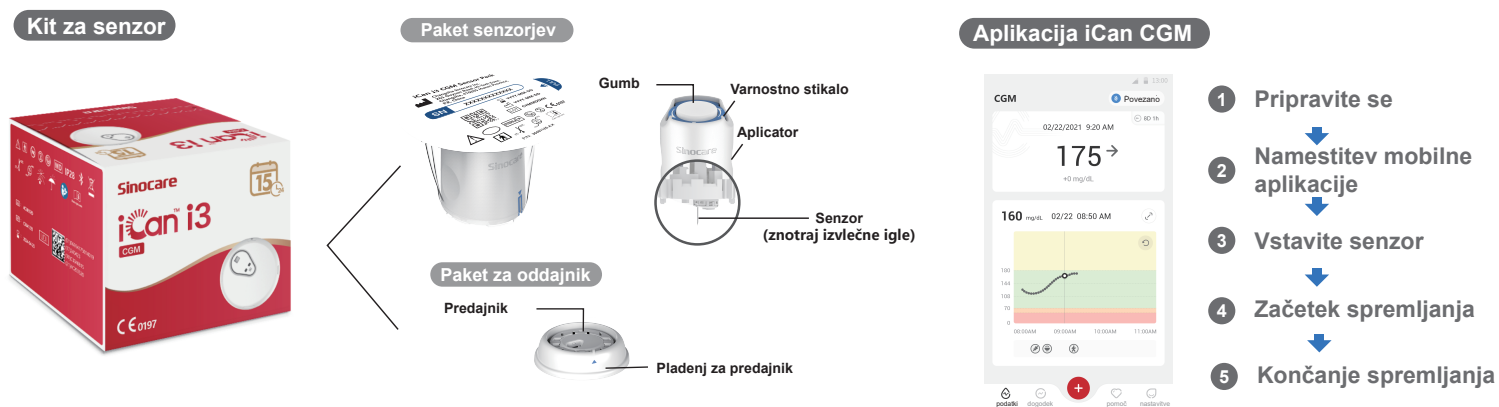

1 Začnite


Korak 1: Namestite aplikacijo iCan CGM

Prenesite aplikacijo iCan CGM iz App Store ali Google Play



Korak 2: Prijava v vaš račun iCan CGM

a. Prijavite se, če že imate račun.
b. Tapnite "Registrirajte se" na dnu, če ste novi v sistemu. Aplikacija vas bo vodila skozi informativne videoposnetke in zaslone. Tapnite "Naprej", da nadaljujete, dokler ne pridete do strani za skeniranje QR koda. Ves čas imejte aplikacijo odprto.

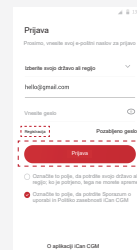

2 Povezovanje s prenosnikom

Korak 1: Izvlecite paket prenosnika



Izvlecite paket prenosnika iz dna škatle s paketom senzorjev.

Korak 2: Preverite, ali se številke SN (Serijska številka) ujemajo



Preverite prvih 8 številke SN kod paketa senzorjev in SN kod prenosnika, da se ujemajo med seboj, preden povežete svoj senzor s prenosnikom.

Korak 3: Povežite se s prenosnikom




a. Odprite aplikacijo in poskrbite, da je Bluetooth vklopljen.
b. Prijavite se v svoj račun in s pomočjo aplikacije skenirajte QR kodo na paketu senzorja.
c. Povezovanje se zgodi samodejno. Ne zapirajte aplikacije in jo med nadaljevanjem na naslednji korak ohranite v dosegu 6 metrov. Če ročno vnesete kodo SN, prosimo, kliknite "Naprej", da nadaljujete.
d. Imejte telefon v bližini in pripravite vstavljanje v naslednjem koraku

3 Vstavitev senzorja

Naučite se, kako vstaviti senzor, sledite Navodilom za hiter začetek sistema za neprekinjeno merjenje glukoze v vašem paketu.


4 Začetek spremljanja

Korak 1: Začnite s senzorjem CGM

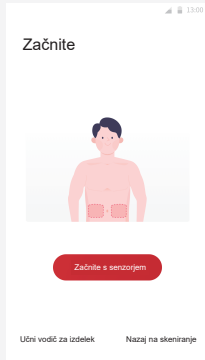


Ko je senzor uspešno vstavljen, vas bo aplikacija CGM pozvala, da začnete s senzorjem. Tapnite "Začni" za naslednji korak.

Korak 2: Počakajte, da se senzor ogreje

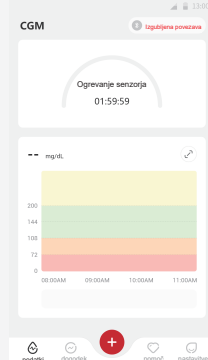


Tapnite "Začni", da začnete z dvournim ogrevanjem senzorja. Do konca ogrevanja ne bo nobenih meritev glukoze ali opozoril. Obdržite aplikacijo odprto in vašo pametno napravo v dosegu 20 čevljev od oddajnika med ogrevanjem senzorja.

Korak 3: Nastavite opozorila

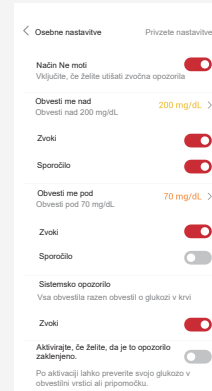

Pozor: Vedno boste prejeli opozorilo o nizki glukozi, ko bo vrednost glukoze vašega senzorja 55 mg/dL ali manj. Za podrobne informacije o opozorilih glukoze in nastavitvi sistema obiščite "Pomembne varnostne informacije" v navodilih za uporabo.

Korak 4: Preverite svojo glukozo

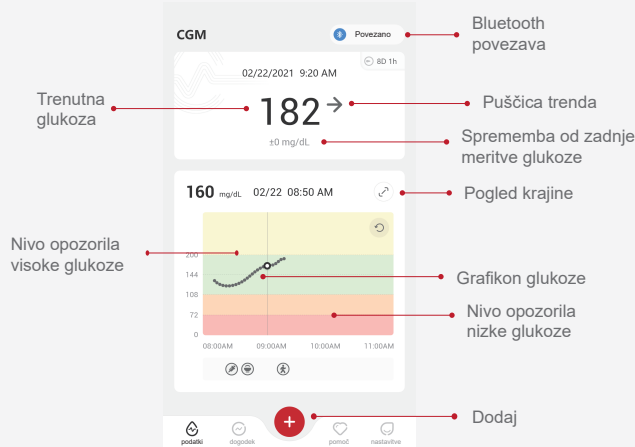


Puščica trenda glukoze

Smer, v katero gre vaša glukoza

Puščica	Kaj to pomeni	Puščica	Kaj to pomeni
↗	Glukoza prehitro narašča	↘	Glukoza počasi pada
↑	Glukoza hitro narašča	↓	Glukoza prehitro pada
↖	Glukoza počasi narašča	↙	Glukoza hitro pada
→	Glukoza je stabilna		

Grafikon glukoze

Graf vaših trenutnih in shranjenih meritev glukoze

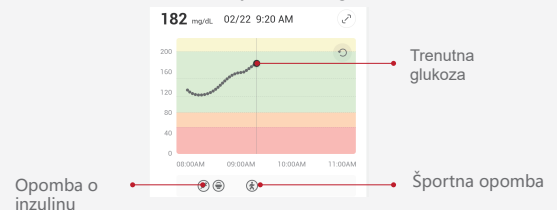


Opomba o inzulinu

5 Zaključek spremljanja


Korak 1: Potrdite, da je trenutna seja zaključena

Ko je 15-dnevna seja spremljanja zaključena, vas bo aplikacija pozvala k zamenjavi novega senzorja ali pregledu Poročila o zgodovini.

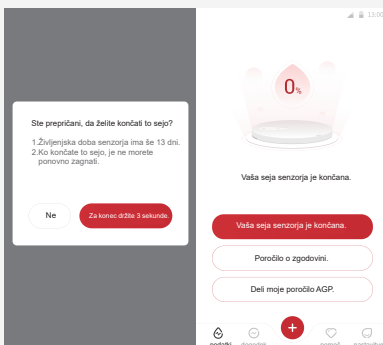

Korak 2: Odstranite senzor

- Dvignite rob lepilnega traku.
- Počasi odlepite lepilo od kože v enem gib

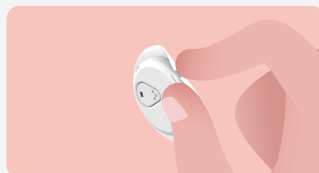

Korak 3: Odstranitev

Ne dotikajte se senzorja in senzorja ni mogoče ponovno uporabiti po odstranitvi. Odvrzite uporabljen senzor v skladu z lokalnimi predpisi.

